

Codman®

Neurosurgery
Disposable Products

Perforators, Surgical Patties,
Scalp Clips & Appliers



Codman®
SPECIALTY SURGICAL

A DIVISION OF INTEGRA LIFESCIENCES

コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター (頭蓋穿孔用)

Perforators



外径: 14mm
内径: 11mm



外径: 11mm
内径: 8mm



外径: 9mm
内径: 6mm



261221

261222

261223

Safety



インナードリル

アウトダードリル



A-traumatic Tip

ドリルの先端形状は“A-traumaticTip”形状を採用しています。

オートリリース機能


ドリル先端に圧力が加わらなくなると、インナードリルとアウトダードリルの連結が外れ、回転が自動的に停止します。

Quality


Single-Use-Device

使用前の組み立てや使用後の洗浄、滅菌の必要がありません。安定した品質で術者の穿孔を迅速かつ正確に支援します。

顕微鏡写真による先端部表面の比較

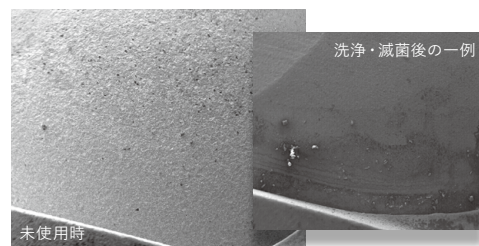

コッドマン ディスポーザブル 頭皮クリップ Scalp Clips & Appliers

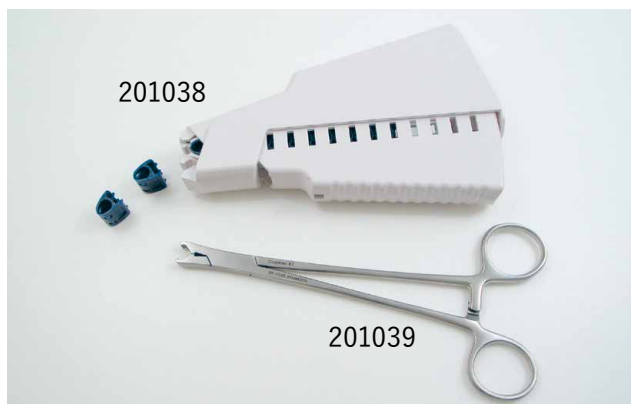

クリップ装着済

12個のクリップ（プラスチック製）がプリセットされていますので鉗子へのセッティングの手間が不要です。

ディスポーザブル

滅菌済パックから取り出し、開封後に即使用可能です。



レイニータイプ



汎用性のあるレイニー頭皮クリップ（プラスチック製）です。

ディスポーザブル

滅菌済パックから取り出し、開封後に即使用可能です。

コッドマン サージカルパティ

Surgical Patties

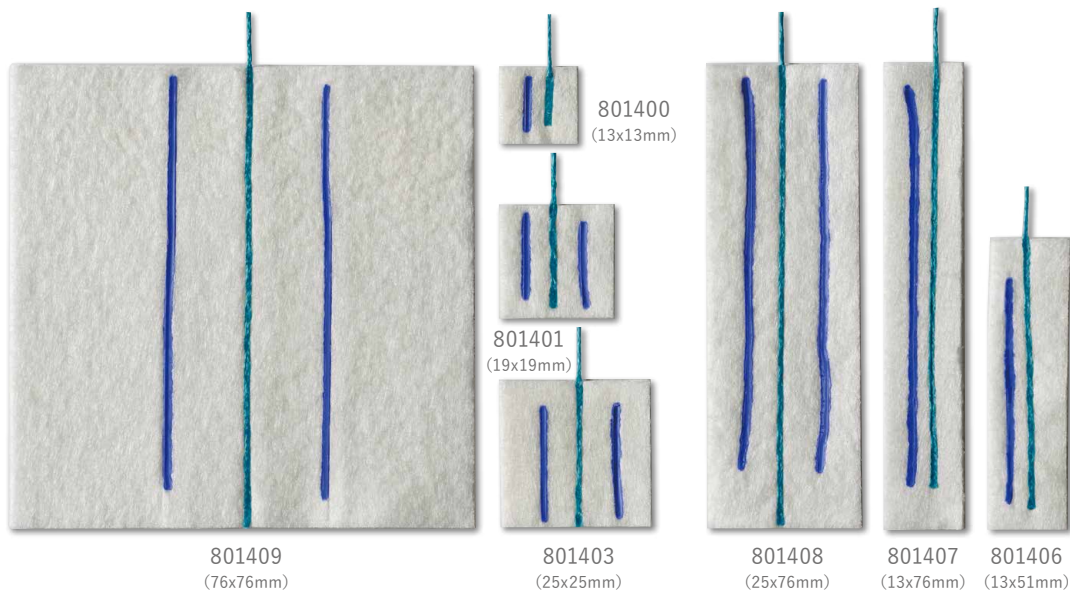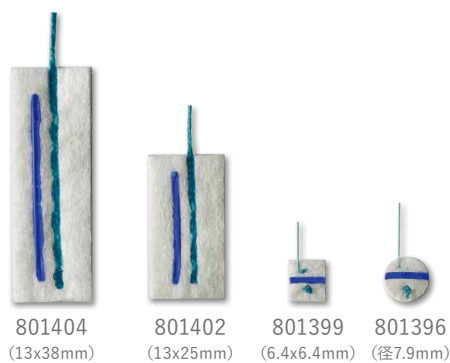

Order Information

新製品番号	旧製品番号	製品名	規格	入り数/箱	滅菌
261221	26-1221	コッドマン ディスポーザブルパーフォレーター	径14mm全長70mm	1個	滅菌済
261222	26-1222	コッドマン ディスポーザブルパーフォレーター	径11mm全長70mm	1個	滅菌済
261223	26-1223	コッドマン ディスポーザブルパーフォレーター	径9mm 全長70mm	1個	滅菌済
801396	80-1396	サージカルパティ	丸型 径7.9mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801399	80-1399	サージカルパティ	角型 6.4mm×6.4mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801400	80-1400	サージカルパティ	角型 13mm×13mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801401	80-1401	サージカルパティ	角型 19mm×19mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801402	80-1402	サージカルパティ	角型 13mm×25mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801403	80-1403	サージカルパティ	角型 25mm×25mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801404	80-1404	サージカルパティ	角型 13mm×38mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801406	80-1406	サージカルパティ	角型 13mm×51mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801407	80-1407	サージカルパティ	角型 13mm×76mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801408	80-1408	サージカルパティ	角型 25mm×76mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
801409	80-1409	サージカルパティ	角型 76mm×76mm	10枚入/パック 20パック入/箱	滅菌済
201038	20-1038	ディスポーザブル頭皮クリップ		12個入/パック 10パック入/箱	滅菌済
201039	20-1039	ディスポーザブル頭皮クリップ用リムーバー	全長177mm	1本	未滅菌
JPWK201037	20-1037	レイニー頭皮クリップディスポーザブル		10個入/パック	滅菌済
205115CN	20-5115	レイニー頭皮クリップ鉗子	全長159mm	1本	未滅菌

製造販売元



Integra Japan株式会社

コッドマン スペシャルティ サージカル

〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル

integralife.com

販売名: コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター
承認番号: 21900BZX00872000

販売名: コッドマン ディスポーザブル 頭皮クリップ アプライヤー
承認番号: 21900BZX00871000

販売名: 頭皮クリップ (滅菌済み)
承認番号: 21900BZX00876000

販売名: CODMAN サージカルパティ
届出番号: 13B1X10284CD0001

販売名: CODMAN 頭皮クリップ リムーバー
届出番号: 13B1X10284CD0003

販売名: CODMAN 頭皮クリップ用鉗子
届出番号: 13B1X10284CD0004